

ADC

H-1085 Budapest

József körút 23. Fsz. 2.

+36 1 282 8909 | info@adc.hu

www.adc.hu | [f](https://www.facebook.com/adc.ultradent) [adc.ultradent](https://www.facebook.com/adc.ultradent)

Árak bruttó árak, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



U2
ULTRADENT



OPALESCE® ÁTTEKINTŐ

KOZMETIKAI



Opalescence® PF 10%



Kozmetikai otthoni fogfehérítő, egyéni mélyhúzott sínhez



Aktív hatóanyag: 10% karbamid-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát, fluorid és xilit

Éjszaka
8-10 óra

Indikáció: Érzékeny fogak esetén, nappali vagy éjszakai viselésre



Ízesítés: Mentol, dinnye, semleges



Opalescence® PF 16%



Kozmetikai otthoni fogfehérítő, egyéni mélyhúzott sínhez



Aktív hatóanyag: 16% karbamid-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát, fluorid és xilit

Napi 4-6
óra

Indikáció: Gyorsabb fehérités érdekében, napközbeni viselésre



Ízesítés: Mentol, dinnye, semleges

Opalescence Go® 6%



Otthoni kozmetikai fogfehérítő, eldobható sín



Aktív hatóanyag: 6% hidrogén-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát, fluorid és xilit

Napi 60-90
perc

Indikáció: Gyors fogfehéritéshez, egyéni sín készítése nélkül



Ízesítés: Mentol, dinnye

UltraEZ®



UltraFit eldobható sín vagy Mélyhúzott sín lenyomat alapján



Aktív hatóanyag: 40% karbamid-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát és fluorid

15-60
perc/nap

Indikáció: érzékenység csökkentés



Ízesítés: semleges

ORVOSI



Opalescence® Boost® 40%



Rendelői nagyhatású fogfehérítő

Aktív hatóanyag: 40% hidrogén-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát és fluorid

2x-3x
20 perc

Indikáció: Betegség, trauma- vagy iatrogén ártalom miatt elszíneződött fogak ellátására szolgáló formula, fogorvos által végezve.



Opalescence® Endo 35%



Rendelői nagyhatású fogfehérítő

Aktív hatóanyag: 35% hidrogén-peroxid

3-5 napig

Indikáció: Non-vitális fogak belső kifehéritése, fogorvos által végezve.



Opalescence® Quick 45%



Rendelői - Egyéni mélyhúzott sínhez várótermi fogfehérítő



Aktív hatóanyag: 40% karbamid-peroxid

Tartalma: kálium-nitrát és fluorid

30 perc

Indikáció: Betegség, trauma- vagy iatrogén ártalom miatt elszíneződött fogak ellátására szolgáló formula, fogorvos által felügyelt.

Opalustre® Slurry



Kémiai és mechanikai abrázíós paszta

Aktív hatóanyag: 6,6%-os sósav, szilikon-karbid mikroszemcsék

Rendelőben
végezve

Indikáció: Eltávolítja a felszínes fehér és barna foltokat, fogorvos által végezve székben.

OPALESCE® PF

KOZMETIKAI FOGFEHÉRÍTŐ

10% és 16% karbamid-peroxiddal,
kálium-nitráttal és fluoriddal



Az Opalescence PF a professzionális fogfehérítés előnyeit nyújtja pácienseinek, otthoni kényelem mellett. A mentolos, dinnyés vagy semleges ízesítésű zselé, amelyet egy egyénileg kialakított vékony fóliasínnel kell felhelyezni, biztosítja a páciens igényeihez igazodó kezelést. Hozzáadott kálium-nitrátot és fluoridot tartalmaz, ezáltal erősíti a zománcot és csökkenti az érzékenységet. A 20%-os víztartalom megelőzi a fog kiszáradását és a szín visszaesést. Választható 10% vagy 16% karbamid-peroxid tartalmú formula attól függően, hogy mennyire érzékenyek a páciens fogai, milyen gyorsan szeretne látható eredményt elérni és mennyi ideig viselné a sínt (napközben 4-6 órát vagy egész éjszaka). A sín felhelyezése első alkalommal a rendelőben történik, ezután a páciens kényelmesen viselheti otthon.

HASZNÁLATA:



Az Opalescence fecskendő zárókupakjának eltávolítása után juttassa az anyagot a fogsin aljába és az arc fele eső oldalfalaira. Sinenként maximum fél fecskendő anyagra lesz szükség.



Egy határozott mozdulattal juttassa a sítet teljesen a helyére, óvatosan nyomkodik meg a sítet, hogy a gél a helyére kerüljön. A túl erős nyomástól kinyomódik az anyag.



A kinyomódott gél feleslegét óvatosan távolítsa el a fogkeféje segítségével. A 10%-os Opalescence fogfehérítőt egész éjszaka, a 16%-os anyagot pedig napközben 4-6 órán keresztül viselje.



Az előírt idő eltelte után vegye le a sítet. Mosson fogat, majd tisztítsa meg a sítet egy puha fogkefével és vízzel.



Küldje el vagy hozza be hozzánk a kiöntött gipszmintát és mi elkészítjük páciense fogfehérítő sínjét vagy harapásemelőjét. (Személyesen megvárva 10 perc alatt elkészül.)

Kíszerelések:

- semleges, mentolos, dinnye ízesítéssel
- 10% vagy 16%

Opalescence PF 4 fecskendőes utántöltő

Ár: 9.705.- Ft

Opalescence PF pácienskészlet

Ár: 21.360.- Ft

OPADESCENCE® GO

ELDOBHATÓ SÍNES OTTHONI KOZMETIKAI FOGFEHÉRÍTŐ

6% hidrogén-peroxiddal, kálium-nitráttal
és fluoriddal

6%-os hidrogén-peroxid
gél, a megfelelő eredmény
érdekében

Külső színes sín,
az egyszerű
felhelyezésért



Könnyen adaptálható,
kényelmes UltraFit sín



A továbbfejlesztett, könnyebben adaptálható egyszerűhasználatos fóliasín a kényelmesebb fehérités élményét nyújtja. A szájba helyezést követően, 10 perc múlva az UltraFit sín meglágyul és az egyénileg kialakított fogsínhez hasonlóan illeszkedik a fogívhez. A fogakat moláristól-molárisig beborító sín által az anyag a hátsó fogakkal is kapcsolatba kerül. A 6% hidrogén-peroxid tartalmú, mentolos vagy dinnyés ízesítésű Opalescence Go zselé viselési ideje 60-90 perc. Kálium-nitrátot és fluoridot tartalmaz, ezáltal erősíti a zománcot és csökkenti az érzékenységet. A 20%-os víztartalom megelőzi a fog kiszáradását és a szín visszaesést. Az első alkalommal a rendelőben felhelyezett sín a továbbiakban otthon is kényelmesen viselhető.

HASZNÁLATA:



Igazítsa középre a fogíven.



Gyakoroljon enyhe szívhóhatást a sínre vagy nyeljen.



Távolítsa el a külső sint.



Viselje 60-90 percig.



Fogfehérités előtt.



6 napos Opalescence GO kezelést követően.



UltraFit sín felhelyezés előtt.



UltraFit sín 10 perccel a felhelyezés után.

Kiszerezések: 10 napos kezelés

Opalescence GO mentolos készlet

Ár: 21.360.- Ft

Opalescence GO dinnyés készlet

Ár: 21.360.- Ft

OPALESCE[®] BOOST

RENDELŐI FOGFEHÉRÍTŐ

40% hidrogén-peroxiddal,
kálium-nitráttal és fluoriddal
Orvostechnikai eszköz



Az Opalescence Boost rendelői használatra kifejlesztett nagyhatású fogfehérítő zselé lehetővé teszi egy vagy több fog,- vagy a fog egyes részeinek gyors kifehérítését valamint a fehérítőeljárás felgyorsítását. Gyökérkezelt fogak intrakoronális fehérítésére is alkalmas a rendelőben. Más, hasonló anyagoktól eltérően az eljárás nem igényel költséges, a fogakat kellemetlenül felmelegítő lámpát. A zselé kálium-nitrát és fluorid tartalma erősíti a zománcot és csökkenti az érzékenységet. A 20%-ot meghaladó víztartalom megelőzi a fog kiszáradását és a szín visszaesést.

A koronák vagy héjak készítésével összehasonlítva, ez egy sokkal konzervatívabb módja a belülről sötétten elszíneződött fogak kifehérítésének. Az ilyen elszíneződések hátterében állhatnak egyes betegségek, trauma vagy iatrogén ártalmak, veleszületett, és szisztémás okok, valamint gyógyszerártalmak. Ezek lehetnek többek között a megemelkedett bilirubin-szint, tetracyclin-és felnőttkori minocyclin okozta foltok, porphyria, erythroblastosis fetalis és a fogfejlődés során bekövetkező túlzott fluoridbevitel.




AJÁNDÉK


Bemutatjuk az új Umbrella™
lágyszövet-retraktort.
Most minden Opalescence Boost
vásárláskor egy Umbrella-t adunk
ajándékba.




KEVERÉSI ÚTMUTATÓ:

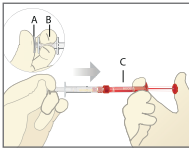

Az átlátzó dupla dugattyús fecskendőt egy erőteljes mozdulattal nyomja egymásba. (A+B)

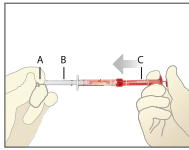

A piros fecskendő tartalmazza a peroxidot. A piros fecskendő tartalmát egy határozott mozdulattal nyomjuk át az átlátzóba. C > B

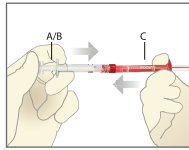

Majd a keverés úgy történik, hogy az anyagot az egyik fecskendőből a másikba oda-vissza, összesen kb. 25-ször kell átnyomni. (AB+C)



A megfelelő módon összekevert anyagot nyomja át a piros fecskendőbe. Távolítsa el az átlátzó fecskendőt és dobja el. Erősítse rá a piros fecskendőre a Micro 20g FX véget. Ellenőrizze az anyag adagolhatóságát mielőtt szájjában használná. Ha az adagolás akadályozott, NE használja, cseréljen véget.

FONTOS:

Az összekeverést követően a hűtőszekrényben tárolt Opalescence Boost még 10 napig felhasználható.

A kezelés alatt (az anyag keverése és használata alatt) védeni kell az orvost, asszisztens és a páciens szemét oldalellen-zővel ellátott védőszemüveggel. Viseljen védőkesztyűt!

HASZNÁLATA:



Vegyen fel védőfelszerelést (védőruházt, védőszemüveg, gumikesztyű) A páciensre is tegyen védőszemüveget. Ellenőrizze, hogy a két fecskendő megfelelően egymásba van tekerve. Az anyag legyen szobahőmérsékletű.



Helyezze be a műanyag orca terpesze- ket. Alaposan mossa és szárítsa le a fogakat. Helyezze be az IsoBlock ráharapásos blokk-ot és kérje meg a páciént, hogy enyhén, de határozot- tan ráharapva tartsa azt a helyén.



Helyezzen fel egy kb. 4-6 mm széles és 1,5-2 mm vastag Opaldam Green csíkot az ínyre. A gyantát terjesz- rá kb. 0,5 mm szélesen a zomán- cra is. A védőhabot az utolsó fehérít- tendő fog szomszédjára is ki kell terjeszteni.



A gyantagát felhelyezése után rész- letekben világítsa meg az anyagot fogigényként 20 másodpercig. Tükör- rel ellenőrizze a gyantagát zárását a zománcszélén, illetve szondával az anyag megkötését.



Vigye fel az Opalescence Boost-ot 0,5-1 mm vastagon a fog labialis fel- színeire. Hagyja az anyagot a fogakon 20 percig, időnként ellenőrizve az anyagot a fogon.



Az applikációt követően távolítsa el az anyagot a fogakról kizárólag elszívó használatával. Hogy meg- előzze az anyag szétfröccsenését a légyszívóvetekre, NE használjon víz-spray-t a letisztításhoz. Helyezzen fel újra friss gélt és ismételje meg a 6-7. pontban leírtakat kétszer, vagy a megfelelő eredmény eléréséig. Ne haladjon meg az alkalmankénti maxi- mum 3 applikációt.



A végső applikációt követően tá- volítsa el az összes gélt kizárólag elszívóval, majd mossa le a fogakat vízzel a metsző élek irányába, elszí- vó együttes használata mellett. Óva-atosan egy szondával alányúlva távo- lítsa el az Opaldam Green inyvédt a fogközökből.



Értelmezze a színváltozást. Amennyi- ben további fehérítésre van szükség és érzékenység nem áll fent, azt 3-5 nap múlva ismételje meg vagy egészítse ki otthoni fogfehérítéssel.

Kiszerezések

Opalescence Boost Készlet
2 x 1,2 ml fecskendő Boost
1 x 1,2 ml Opaldam inyvédt

Ár: 24.415.- Ft

OPALESCE[®] ENDO

NON-VITÁLIS FOGAK KEZELÉSÉHEZ

35% hidrogén-peroxid tartalommal

Orvostechnikai eszköz



Az Opalescence Endo speciálisan betegség, trauma- vagy iatrogén ártalom miatt elszíneződött gyökérkezelt fogak „sétáló” módszerrel történő kifehérítésére szolgáló formula. A pulpakamrába helyezett és ideiglenesen lezárt zselét 3-5 napig kell a fogban hagyni.

HASZNÁLATA:




A gyökércsatorna bemenetét üvegionomer cementréteggel szigetelje, hogy peroxid ne kerüljön az apikális régióba.




Juttassa az Opalescence Endo-t a trepanációs nyílásba.



Helyezzen egy kis vattát az Opalescence tetejére, majd zárja le a trepanációs nyílást az UltraTemp[®] ideiglenes tömőanyaggal.

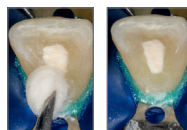

Törölje le a felesleget egy nedves vattarollal. 3-5 napig a fogban marad, igény szerint cserélhető.

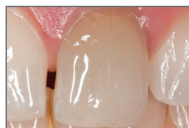

Fogfehérítés előtt.



Fogfehérítés után.



Fogfehérítés előtt.



Fogfehérítés után.

Kiszerelések

Opalescence Endo készlet
2 x 1,2 ml fecskendő

Ár: 18.795.- Ft

OPADESCENCE® QUICK

EGYÉNI MÉLYHÚZOTT SÍNHEZ VÁRÓTERMI FOGFEHÉRÍTŐ

fehérítő 45% karbamid-peroxiddal,
kálium-nitráttal és fluoriddal
Orvostechnikai eszköz



Az Opalescence Quick-kel végzett fogfehérítés fogorvosi felügyelettel történik, miközben a beteg a váróteremben várakozik. A viselési idő 30 perc, de az orvos megítélése alapján más is lehet. Kizárólag rendelői használatra. Ez a kezelési mód jóval konzervatívabb alternatívája a belső elszíneződések kifehérítésének, mint a korona- vagy héj készítés. Az ilyen elszíneződések hátterében állhatnak egyes betegségek, trauma vagy orvosi kezelés, ugyanúgy, mint veleszületett- és szisztémás okok, anyagcsere betegségek, gyógyszerártalmak és iatrogén faktorok. Ezek lehetnek többek között fluorid-, tetracyclin-, és felnőttkori mynocylin ártalom, erythroblastosis fetalis, sárgaság és porphyria.

HASZNÁLATA:



Juttassa az anyagot a fogsín alá és az arc fele eső oldalfalaira. Sínenként maximum fél fecskendő anyagra lesz szükség.



Egy határozott mozdulattal juttassa a színt teljesen a helyére, óvatosan nyomkodja meg a színt, hogy a gél a helyére kerüljön. A túl erős nyomástól kinyomódik az anyag.



A kinyomódott gél feleslegét óvatosan távolítsa el a fogkefe segítségével.



A 30 perces viselésre ültesse ki a beteget a váróterembe.



Dentinogenesis imperfecta szűrűs elszíneződés.



Opalescence Quick 4 applikációt követően.



Súlyos tetraciklines elszíneződés esetében hosszabb kezelésre kell számítani.



Fél éves fogfehérítést követően.

Kiszerezések

Opalescence Quick utántöltő
4 x 1,2 ml fecskendő

Ár: 16.100.- Ft

OPALUSTRE PASZTA

6,6% sósavat tartalmazó kémiai és mechanikai abrázíós paszta




Az Opalustre paszta alacsony, 6,6%-os koncentrációban sósavat, valamint szilikon-karbid mikroszemcséket tartalmaz, ezáltal kémiai úton és mechanikai abrációval távolítja el az elszíneződéseket. Ez a minimalinvazív mikroabrázíós módszer véglegesen megszünteti az enyhe fluorózis vagy demineralizáció okozta felszínes fehér és barna foltokat. Már egyetlen kezelés is jelentős javulást eredményez. A paszta ideális viszkozitása lehetővé teszi a pontos felvitelt és a kontrollált használatot. Az OpalCup polírozófejjel fokozza a mikroabrázíó hatékonyságát és minimálisra csökkenti az anyag szétfröccsenését.

HASZNÁLATA:



Előtte.

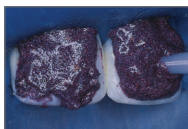

Kofferdam izolálás felhelyezését követően vigye fel az Opalustre-t az elszíneződött zománcra.



A sörtéket tartalmazó gumifejjel polírozza a pasztát a fogfelszínre. Időnként mossa le és ellenőrizze az eredményt.



Mikroabrázíós eljárás és 21 napos Opalescence fogfehérítés együttes eredménye.

Kiszárazások

Opalustre utántöltő
1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 9.345.- Ft

Opalustre Készlet
4 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 32.550.- Ft

ULTRAEZ

ÉRZÉKENYSÉGCSÖKKENTŐ ZSELÉ

3% kálium-nitráttal és fluoriddal
(0,25% semleges NaF)



Az UltraEZ folyamatosan felszabaduló kálium-nitrátot és fluoridot tartalmazó érzékenységsökkentő zselé. A ragacsos, nyúlós gél nem folyik ki a sínből, rátapad a fogakra és azonnal csökkenti az érzékenységet. Gyorsan megszünteti a fogmosás-okozta abrázíó, hő- és kémiai ingerek-, fogfehérítés és szabaddá vált gyökérfelszín-okozta érzékenységet. A zselé mind rendelői-, mind pedig otthoni használatra ajánlott a dentin érzékenység csökkentésére. Fecskendős kiszerezés vagy UltraFit egyszerűhasználatos sínes megoldás áll rendelkezésre.

HASZNÁLATA:



Vegye ki a csomagolásból.



Igazítsa középre a fogíven.



Gyakorlaton enyhé szívóhatást a sínre, vagy nyeljen.



Távolítsa el a külső, színes színt.



Nyeljen újra.



Viselje 15-60 percig.

Kiszerezések

UltraEZ utántöltő
4 x 1,2 ml fecskendő

Ár: 8.695.- Ft

UltraEZ sínes
10 db alsó-felső sín

Ár: 19.845.- Ft

OPADESCENCE® FOGKRÉM


FOGFEHÉRÍTŐ FOGKRÉM

eredeti és érzékenységsökkentő formula



Az Opalescence fogfehérítő fogkrém segít megőrizni a fehér fogszínt. A professzionális formula eltávolítja a felszínes elszíneződéseket és erősíti a fogzománcot a gyors fluorid beépülés által. Alacsony abrazitású, így mindennapos használatra alkalmas. Antibakteriális hatásával hozzájárul a szájüreg tisztaságához és egészségéhez.

Az érzékenységsökkentő formula mellett, hogy rendelkezik az eredeti formula nyújtotta előnyökkel, kálium-nitrát tartalmával csökkenti az érzékenységet. Mindkét fogkrém mentolos ízesítésű.

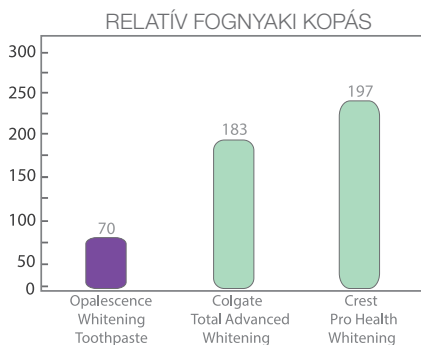

Kiszerezések

Opalescence fogkrém 100 ml

Ár: 3.285.- Ft

Opalescence fogkrém 25 ml

Ár: 1.175.- Ft

HOGYAN MŰKODIK A FEHÉRÍTÉS?

Az eljárás azon alapul, hogy a karbamid-peroxid és a hidrogén-peroxid akadálytalanul áthatol a zománcra és a dentinen, így a fog minden részébe eljut. A peroxidok lebomlásakor keletkező oxigén-szabadgyökök a zománcprizmák közé behatolva lebontják az elszíneződést okozó molekulákat, ezáltal optikailag fehérebbé téve a fogat.

Mivel a peroxid kizárólag ez utóbbi molekulákkal lép kapcsolatba, így a folyamat során a fog szerkezete változatlan marad. A fogfehérítőanyag a fog belsejében ott is kifejti hatását, ahol a foganyag nem érintkezik közvetlenül az anyaggal.

BEFOLYÁSOLJA-E A FOGFEHÉRÍTÉS A RAGASZTÁS ERŐSSEGET?

Bár a fogfehérítő eljárás során nagy mennyiségű oxigén szabadul fel, a már meglévő ragasztásokra ez nincs hatással.

Fogfehérítés után viszont ajánlott 7-10 napot várni a ragasztásokkal, mivel a fogban felhalmozódott oxigén zavarja a különböző rezinek polimerizációját.

MENNYIRE TARTÓS A FOGFEHÉRÍTÉS EREDMÉNYE?

Az eredmény általában nagyon tartós, de mindenképpen befolyásolja a páciens életmódja és táplálkozási szokásai. Időnként szükség lehet a kezelés megismétlésére, de a biztonságos anyagokkal ez nem okoz problémát.

ÉRZÉKENYÉ TESZI A FOGFEHÉRÍTÉS A FOGAKAT?

A fogfehérítés viszonylag gyakori mellékhatása, hogy a fogak átmenetileg érzékenyvé válnak, de ez a kezelés befejezése után magától is megszűnik. Amennyiben érzékenységsökkentő használata szükséges, ajánljuk az UltraEZ gélt, Enamelast™ fluorid lakk vagy Opalescence™ fogkrém használatát.

GYENGÍTI A FOGFEHÉRÍTÉS A FOGZOMÁNCOT?

Nem, a fogfehérítőt nem találták zománcgyengítő hatásúnak.



30

YEARS OF
OPALESCEENCE™
 WHITENING



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Ultradent® LC Block-Out Resin
Fényrekötő helyfenntartó gyanta

- Alacsony viszkozitás a megfelelő applikációért
- Kék színezőanyag
- Általános használatra alkalmas rezin

1,2 ml fecskendő

Ár: 2.200.- Ft



Opalescence®
Fogcsintartó doboz

- Fogfehérítő- és harapásemelő sínek tárolására
- Lapos, hordozható kivitel (belső mérete: 7,5 × 7 × 1,5 cm)
- Több színben kapható (kék, zöld és rózsaszín)

Fogcsintartó dobozka 1 db

Ár: 645.- Ft



Sof-Tray®
Mélyhúzó fóliák

- 0,9 mm-es fogfehérítősínhez
- 1,5 mm-es fogcsikorgató páciens esetén
- 2,0 mm-es harapásemelőkhöz vagy TMJ-készülékhez is.

0,9 mm

Ár: 455.- Ft

1,5 mm

Ár: 455.- Ft

2 mm

Ár: 520.- Ft



OpalDam®
Fényrekötő izoláló gyanta

- Közvetlenül felvihető
- Áthatolhatatlan szigetelőanyag a lágyrészek védelmére
- Fényvisszaverő szemcséket tartalmaz, így a megvilágításkor a szövetek nem válnak hőre érzékennyé
- Könnyen eltávolítható

OpalDam 1,2 ml

Ár: 5.505.- Ft

OpalDam készlet

4 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 19.120.- Ft



Ultra-Trim
Fóliásin körbevágásához

- Pontosan követi az ínyzést, kikerüli a papillákat
- Ujjakat kímélő, rugós szerkezet
- Könnyedén elvágja a fóliát
- Anyaga tartós rozsdamentes acél

Ultra-Trim olló

Ár: 16.885.- Ft



Dermadam®
Nyálrekesz

- Erős és szakadásálló
- Púdermentes az allergiás reakciók csökkentéséért
- A dermatitis kockázata alacsony

Dermadam latex medium 36 db

Ár: 10.855.- Ft


Dermadam latexmentes 20 db

Ár: 15.645.- Ft



Az új Umbrella™ lágyszövet-retraktor tervezésekor a páciens kényelme volt az egyik fő szempont. A lágyszövetek támasztásán kívül az eszköz:

- Természetes módon és finoman tartja nyitva a száját és nem húzza vagy feszíti a páciens ajkait.
- Segítséget nyújt az öklendező páciensek számára is, mivel csökkenti az öklendezési reflexet.
- Helyben hagyható a harapás ellenőrzése közben és alkalmazhatja harapás-blokkal is, így a nyelv kényelmesen helyezkedik el a nyelveltartó mögött.
- Számos beavatkozásnál használható (II. osztályú restaurációk, barázdázás, fogszabályozó készülék ragasztás, fogfehérítés stb.).
- Megnyitja az ajkak és a bucca közötti teret és elősegíti a nyál elvezetését a kezelési területről és segíti ezáltal a hozzáférést.
- A páciens és a kezelőorvos is behelyezheti.
- Egyszer használatos.

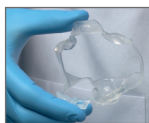

1. LÉPÉS
Nyomja össze az Umbrella™ lágyszövet-retraktor fülét a behelyezéshez



2. LÉPÉS
Kérje meg a páciént, hogy helyezze a nyelve hegyét a szápadlásra.



3. LÉPÉS
A retraktor egyik oldalával kezdje a behelyezést a buccába.



4. LÉPÉS
A fülék segítségével igazítsa a retraktort a beteg szájában középre.



5. LÉPÉS
Ellenőrizze, hogy a páciens nyelve kényelmesen helyezkedik el a nyelveltartó mögött és a munkaterülethez könnyen hozzáfér.

Kiszerezés

Umbrella lágyszövet-retraktor, közepes 5 db

Ár: 3.700.- Ft

ENAMELAST™



- 5% natrium-fluorid lakk
- Gyors, egykezes applikáció
- Applikálás után nem érezhető a fagon
- Egyenletes fluorideloszlást biztosít
- Egységdózisú vagy fecskendős kiszerezésben kapható
- Walterberry ízesítés

Az Enamelast ízesített, xilittel édesített, 5% nátrium-fluorid tartalmú rezin. Konzisztenciája és az egyedülálló kiszerezése biztosítja a kényelmes felvitelt és az egyenletes fluorideloszlást.



HASZNÁLATA:

Az Enamelast mechanikai úton lezárja az érzékeny fogak dentincsatornáit. Az AAPD ajánlása szerint „a fluoridlakk alkalmazása hatékonyan megelőzi a zománc demineralizáció kialakulását a caries szempontjából rizikó csoportba sorolható gyermekeknél”. A fluoridlakk cariespreventív hatását az ADA is jóváhagyta.

Kiszerezés

Enamelast 2 x 1,2 ml

Ár: 7.045.- Ft

UltraSeal XT[®] hydro[™]

Hidrofil barázdazáró



Inspirational Brush vég




Blue Micro vég




- Új hidrofil összetétel
- Új továbbfejlesztett ragasztási technológia
- Új fluoreszcens tulajdonság
- Magas töltőanyagtartalmú rezin
- Tixotróp/ideális viszkozitás
- Két szín: Opak fehér és natural

Az UltraSeal XT hydro fényrekötő, röntgenárnyékot adó, fluorid kibocsátó kompozit barázdazáróanyag. 53%-os töltőanyagtartalmának köszönhetően keménysége és kopásállósága nagyobb, polimerizációs zsugorodása pedig kisebb, mint más barázdazáróké. A spirális kefélet tartalmazó végen áthaladva a magas töltőanyagtartalmú, tixotróp anyag felhígul, viszkozitása csökken, majd a felvitel után visszasűrűsödik, így nem folyik szét.


A hidrofil összetétel és a tixotróp jelleg mikroszkópikus szinten az üregek és barázdák mélyére számúzi a nedvességet (amely hidrofób barázdazáróknál felelős a gyenge széli záródásért). Ilyen módon a továbbfejlesztett technológia biztosítja a barázdazáró erős kötődését a zománchoz, javítja a széli záródást és csökkenti a mikroszivárgást.

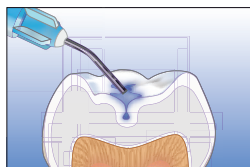

1. Savazás, lemosás, szárítás

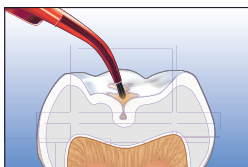

2. UltraSeal XT hydro felvitel

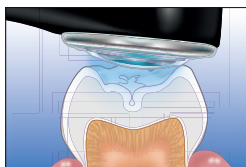

3. Megvilágítás
(3 mp a VALO lámpa Xtra Power üzemmódban)

Kiszerelések

UltraSeal Hydro utántöltő 1,2 ml

UltraSeal Hydro Natural

UltraSeal Hydro Opaque White

Ár: 8.035.-Ft

Ár: 8.035.-Ft

OMNI-MATRIX™

Egyszer használatos körkörös matricafeszítő és szalag



- Higiénikus, eldobható
- Egyszerűen felhelyezhető
- Könnyen illeszkedő
- Kényelmes a beteg számára
- Színkódolt



Az Omni-Matrix speciális, belső csavarrendszere segítségével a matricaszalag mérete egyszerűen beállítható a fogkorona nagyságának megfelelően. Mivel a fejrésze forgatható, így bármelyik kvadránsban könnyen illeszkedik a fogra, nincs szükség a szalag kézzel történő állítására. A használat után a tömés sérülése nélkül eltávolítható. A rozsdamentes matricaszalag vékony, könnyen illeszthető, ezáltal segíti a megfelelő kontaktpont kialakítását.

Omni-Matrix 8db/levél

Zöld fém moláris	Ár: 5.125.-Ft
Narancs fém moláris vékony	Ár: 5.125.-Ft
Lila fém premoláris	Ár: 5.125.-Ft
Piros műanyag	Ár: 5.125.-Ft

ULTRADENT® DIAMOND POLISH MINT

Gyémánt polírozópaszta



- Nagy tisztaságú, fehér kristályos gyémántszemcsék
- Kétféle szemcseméret
- Kiváló esztétikai eredmény
- Ideális porcelán vagy kompozit restaurációkhoz
- Jiffy polírozókefékkel vagy korongokkal együtt használható
- Mentaízű

Kiszerelések

Diamond Polish 0,5 mikron
2 x 1,2 ml

Ár: 8.295.- Ft

Diamond Polish 1 mikron
2 x 1,2 ml

Ár: 8.295.- Ft

SABLE™ SEEK® ÉS SEEK®

Caries indikátorok



- Kimutatja a demineralizált dentint
- Precíz, tiszta applikálást biztosít
- Sötétzöld szín – A gyökércsatorna bemenet könnyű kimutatására és pulpaközeli szuvasodások esetében

Piros vagy zöld festék bázikus glikolban, ami a szuvas dentint megszínezi.

Kiszerelések

SableSeek zöld
4 x 1,2 ml fecskendő
2 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 9.990.-Ft

Ár: 8.120.-Ft

SableSeek piros
4 x 1,2 ml fecskendő

Ár: 9.990.-Ft

VISCOSTAT® CLEAR

25% alumínium-klorid



- Gyors és hatékony vérzéscsillapítás az esztétikus zónában
- Nem okoz elszíneződést
- Egyszerű adagolás
- Viskózus, átlátszó konzisztencia
- Könnyen lemosható¹

A Viscostat Clear fő hatóanyaga a 25%-os alumínium-klorid, viszkózus közegben. pH-ja ~1.0. Használata különösen frontfogak területén javasolt, mivel rövid időn belül elállítja a ki-sebb kapilláris vérzéseket, valamint a sulcusnedv szívárgást, a lágy szövetek elszínezése és koagulum képződés nélkül.

Hatását nem koagulumképzés útján feje ki, hanem a környező szövetek enyhe megduzzadásával a kapillárisok falai összenyomódnak.

Kiszerezés

Viscostat Clear 30 ml

Ár: 12.495.- Ft

VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS – ULTRAPAK®

Sima hurkolt fonál



- Az eredeti hurkolt fonál
- Gyors sulcustágítás, pontos ínyszél és precíz lenyomatvétel
- Szerkezeténél fogva egyszerűen behelyezhető és a helyén marad
- Behelyezéskor összenyomódik, majd visszanyeri eredeti méretét az optimális retenció eléréséhez
- Nem tekeredik rá a fúróra
- Színkódolt méretezés

Kiszerezés

UltraPak fonal 244 cm

(000, 00, 0, 1, 2, 3 méretben)

Ár: 6.420.- Ft

ULTRA-ETCH®

Foszforsav



- Savazóhatás behatárolt mélységig
- Képes behatolni a legszűkebb barázdákba is, ugyanakkor nem folyik le a függőleges felszínről
- Növeli a bondkötés szilárdságát, csökkenti az érzékenységet
- Precízen felvihető
- Könnyen, maradéktalanul leöblíthető
- Sötétkék színe könnyen láthatóvá teszi


Az Ultra-Etch 35%-os foszforsavoldat. Ideális viszkozitása lehetővé teszi a precíz felvitelt a Blue Micro és az Inspiral Brush végekkel. Behatárolt mélységű savazóhatása (átlag 1,9 mikron a 15 mp-es időtartam alatt) olyan zománcmintázatot eredményez, ahová a bond erős kötődést és minimális utóérzékenységet előidézve képes behatolni. Az Ultra-Etch optimális felszínelőkészítő hatása vizsgálatokkal igazolt.³ Habár viszkózus anyag, behatol a szűk barázdákba és occluzális felszínébe a kapillárishatást elősegítő fizikai és kémiai tulajdonságai által. Ideális viszkozitása biztosítja a megfelelő rétegvastagság fenntartását a korai kiszáradás ellen.

HASZNÁLAT


Az Ultra-Etch egyaránt használható dentin, illetve zománc felszínén az optimális kötési felület eléréséhez.



Klinikai tapasztalat és FE-SEM értékelések³ mutatják, hogy 20 másodperc savazási idő mind a dentinen, mind a zománcan biztosítja mindkét szövet optimális kondicionálását. Levegő/víz öblítés. Törölje le a felesleges vizet, a felületet láthatóan nedvesnek hagyva.

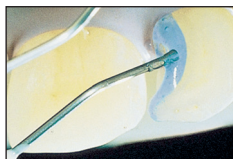

A sav egy vékony vonalban is könnyen felvihető. A Blue Micro véggel lingvál felől is lefolyásmentesen alkalmazható.

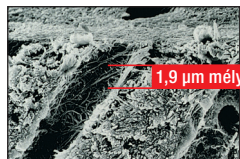

Az Ultra-Etch esetén bizonyítottan behatárolt a savazás mélysége, 15 mp-es időtartam alatt 1,9 mikron. Ez az érték folyékony foszforsavnál (37%) 20 mp alatt átlagosan 5 mikron, egy versenytárs polimerrel sűrített savazóanyagánál pedig 4,8 mikron. Ez a mélység már túlhaladja az optimális mértéket, és a rezinek inkomplett penetrációját eredményezi.

Kiszerelések

Ultra-Etch 30 ml

Ár: 19.845.-Ft

Ultra-Etch 4 x 1,2 ml

Ár: 6.625.-Ft

Ultra-Etch 2 x 1,2 ml, végek

Ár: 6.040.-Ft

ULTRADENT® PORCELAIN REPAIR KÉSZLET


Sav, szilán, bond és folyékony kompozit



- Tartalmazza az összes anyagot, amely a kompozit felvitele előtt szükséges
- Magas kötési szilárdságot biztosít
- Gyors, egyszerű javítás, keverés nélkül

HASZNÁLAT


A porcelánjavítás egyre elterjedtebb eljárás. Ez a módszer jóval költségkímélőbb és kevésbé invazív, mint a fogmű cseréje. Az Ultradent Porcelain Repair Kit minden szükséges terméket és véget tartalmaz, amely a kompozit-porcelán, porcelán-fém és a porcelán-porcelán javításokhoz szükséges.

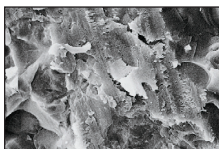

1. Gyémánttal felérdesített porcelán fel-szín.



1. Az Etch Arrest védőgát felhelyezése után az Inspirail Brush véggel vigye fel a Porcelain Etch-t az előkészített porcelánfelszínre.

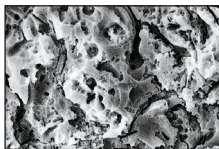

2. Ugyanaz a porcelán 90 mp-es, Ultradent Porcelain Etch anyaggal történő savazás után.



2. A Silane felvitelét és szárítását követően használja a Peak Universal Bondot.

ULTRACAL® XS

30%–35% Kálcium-hidroxid paszta

- Antibakteriális hatású
- Röntgenárnyékot ad
- Kontrollált bevitelt biztosít



Az UltraCal XS sajátos összetételű, vizes közegű, röntgenárnyékot adó kálciumhidroxid paszta. Lúgos kémhatásának (pH 12,5) köszönhető antibakteriális hatása valamint csontgyógyulást stimuláló képessége már régóta bizonyított. Beviteléhez a nagyobb átteresztőképességű, 29ga NaviTip javasolt. Az UltraCal XS könnyen és egyszerűen eltávolítható a csatornából az Ultradent Citric Acid és a NaviTip FX vég használatával.

Kiszerelések

UltraCal utántöltő

2 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 7.415.- Ft

UltraCal készlet

4 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 19.115.- Ft

ULTRADENT® EDTA

18% oldat

A gyökércsatornát kelátképző folyamat révén kondicionáló/tisztító anyag. A smear layer eltávolítására és a csatorna végső átöblítésére szolgál a gyökértömés előtt.



Kiszerelés

EDTA folyadék 30 ml

Ár: 5.120.- Ft

FILE-EZE® EDTA LUBRICANT

Reszelő-, síkosító anyag

- Peroxidmentes, nem zavarja a rezinbázisú anyagok kötését

A File-Eze 19% EDTA-tartalmú vizközűs vizes oldat, amely kelátképzés útján síkosítja és törmelékmentesíti a gyökércsatornát.



Kiszerelések

File-Eze utántöltő

2 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 7.460.- Ft

File-Eze készlet

4 x 1,2 ml fecskendő, végek

Ár: 16.040.- Ft



- Bioaktív apatit képző tulajdonsággal bír
- Sima konzisztenciára keverhető
- A keskeny NaviTip végen keresztül adagolható
- Gyors kötési idő
- Indikációtól függően többféle keverési arány

Az MTAFlow ásványi trioxid aggregát cement. A por és a gél keverési arányának változtatásával a különböző indikációkhoz megfelelő állagot tudunk elérni.

Sűrű konzisztencia ajánlott pulpasapkázás, pulpotómia és perforációk bezárására.

Híg állag resorpció, apexifikáció és apical plug esetében.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A gyökércsatorna falán, vagy a furkációs területen keletkezett perforációk bezárása, foggyökerek resorpciók kezelése, retrográd gyökércsatorna tömése, a pulpa vitalitásának megtartása (pl. direkt pulpasapkázás, részleges- vagy teljes pulpa amputáció utáni sebek lefedése).

Kiszerelés

MTAFlow készlet
2 gr MTAFlow por
2 ml MTAFlow gél

Ár: 39.345.- Ft

VALO CORDLESS


Vezeték nélküli LED polimerizációs lámpa



- Nagyenergiájú, széles spektrumú LED-ek mindenfajta fogászati anyag polimerizálásához
- Az optimálisan párhuzamosított fénynyaláb teljes és egységes polimerizációt biztosít
- Három üzemmód: standard, nagy teljesítményű és extra teljesítményű
- Az egyedülállóan tartós, könnyű, ergonomikus kivitel minden felszínhez kiváló hozzáférést biztosít
- Környezetbarát, biztonságos, gazdaságos, újratölthető akkumulátorokkal működik
- A rendkívül hatékony LED-eknek és a repülőgépipari minőségű alumíniumnak köszönhetően a lámpatest nem melegszik

HASZNÁLAT

A VALO lámpa LED diódái a 395-480 nm közötti hullámhossz tartományban bocsátanak ki nagy intenzitású fényt, amely minden fényrekötő kompozit polimerizálására alkalmas. Ez a fényintenzitás a minőségi halogénlámpák fényéhez hasonlóan a porcelánon is áthatol, és megköteti az alatta lévő ragasztócementet. A vezeték nélküli VALO lámpa újratölthető akkumulátorokkal működik, amelyek töltője 100-240 Voltos hálózathoz csatlakoztatható. A kézidarab behelyezhető a standard kezelőegység tartójába vagy a készletben található konzollal egyedileg is rögzíthető. Tárolható akár a pulton is. A VALO Cordless fény mozgására reagáló érzékelőjének köszönhetően a lámpa használaton kívül automatikusan alvó üzemmódba lép, és mozgásra újra visszatér a legutóbb használt beállításhoz.

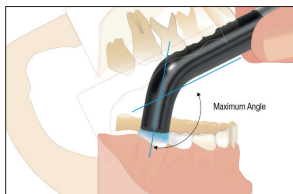

A fényvezető 60 fokok szöge az állkapocs tölfeszítését okozza és korlátozza a felszínhez való teljes hozzáférést.



A VALO keskeny feje egyszerű és közvetlen hozzáférést biztosít minden felszínhez.

mosaic™

Universal Composite

Az egyszerű kezelhetőség és
esztétika tökéletes összhangja



- Húsféle színárnyalat, kiszámítható és természetes végeredmény
- Könnyen kezelhető és formázható
- Sima, hajlékony konzisztencia
- Egyszerűen adagolható és nem tapad a műszerhez
- A formázást követően alaktartó
- A környező fény nem befolyásolja a feldolgozási időt
- A fecskendőhöz csatlakoztatott kupak kényelmes megoldást biztosít
- A 4 grammos fecskendő nyele ergonomikus kialakítású és könnyen tisztítható

A Mosaic univerzális tömőanyag egyaránt alkalmas a front- és rágófogak egyszerű, vagy komplex felépítésére. A kiegyensúlyozott nanohybrid- formula biztosítja a legmagasabb igényeket kielégítő, tartós és kiváló esztétikájú helyreállítást. Könnyen kezelhető és formázható, nem ragad a tömőműszerhez, és a felhelyezést követően nem folyik szét és nem esik össze, megtartva így a kialakított formát. A húsféle szín segítségével könnyen reprodukálható a természetes végeredmény.

INTUITÍV SZÍNVÁLASZTÉK



A0.5, A1, A2, A3,
A3.5, A4, A5
B0.5, B1, B2,
C2, C3, D2

DENTIN



Enamel Blush
Enamel Neutral
Enamel Yellow
Enamel Gray
Enamel White

ZOMÁNC



Enamel Trans

TRANSZ



Opaque White

OPAK

Húsféle színárnyalat, kiszámítható és
természetes végeredmény

Kiszerelés

Mosaic utántöltő 4 gr

Ár: 16.110.- Ft

JIFFY® POLÍROZÓK

Harang, lencse és hegy alakú



- Kiváló az olyan kompozitok, mint pl. az Amelogen Plus végső kidolgozására és polírozására
- Latex-mentes
- Autoklávban sterilizálható

JIFFY® KOMPOZIT POLÍROZÓ KEFÉK

Hagományos és hegyes



- Minden egyes sörté ezernyi szilikon-karbid polírozószemcsét tartalmaz
- Könnyen eléri és lesimítja a kompozitok és kerámiák rágófelszíni barázdáit
- Kompozitok polírozásakor a sörtéket nyomja erősen a felszínhez, magas fordulatszámon (RPM 5000-10000) működtetve a kézidarabot
- Többszöri, korlátozott számú autoklávozást követően is megtartja formáját

Kiszerelés

1 db polírgumi

Jiffy kompozit

Ár: 935.- Ft

1 db kefe

Jiffy kompozit polírkefe

Ár: 2.945.- Ft



VALO™

BROADBAND **LED** CURING LIGHT

U2
ULTRADENT™